


Interpretacja wyników testu

W ciągu 15 minut w okienku kontrolnym na płytce może pojawić się jedna lub dwie linie lub może nie pojawić się żadna linia.

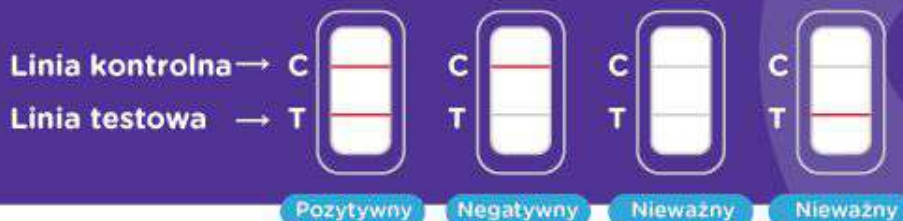

Pozytywny (+)

W okienku kontrolnym pojawią się dwie linie obok liter (C) i (T). Oznacza to obecność zakażenia chłamydią. Należy wówczas zgłosić się do lekarza lub laboratorium w celu wykonania dalszych badań.

Negatywny (-)

W okienku kontrolnym na płytce testowej pojawi się tylko jedna linia obok litery (C). Oznacza to brak zakażenia chłamydią. Aby potwierdzić ten wynik, zaleca się wykonanie kolejnego testu.

Nieważny

Jeżeli w okienku kontrolnym na płytce testowej nie pojawia się żadna linia lub pojawia się jedna linia obok litery (T). Należy wówczas powtórzyć wykonanie badania korzystając z nowego testu.

Każdy test służy do jednorazowego użytku. Nowy test można zamówić na stronie pl.treated.com/testy-na-choroby-weneryczne

Wyprodukowano przez:
Hangzhou Alltest Biotech Co., Ltd

Dystrybutor:
Lintor Ltd.
27 Gen. Kisetlov st, Varna, 9000
Bułgaria

✉ info@yourselftests.com

🌐 www.yourselftests.com

Test na chłamydię

Bezpieczny i dyskretny sposób na wykonanie badania w domu

Instrukcja

Ważne: przed wykonaniem testu, należy uważnie przeczytać treść instrukcji.

Zawartość opakowania testowego

- ✓ Płytkę testową osobno zapakowaną
- ✓ Sterylny patyczek do pobrania próbki
- ✓ Roztwór buforowy (Reagent 1, Reagent 2)
- ✓ Plastikową probówkę z nasadką

Uwaga: do wykonania testu potrzebne będą zegarek, budzik lub stoper, aby odmierzać czas.

 **pl.treated.com[®]**

Jeżeli w trakcie wykonywania testu pojawiają się wątpliwości lub potrzebna będzie pomoc, zapraszamy do kontaktu mailowego, pisząc do nas na kontakt@treated.com lub do producenta testu na info@yourselftests.com

Wprowadzenie

Chłamydia jest chorobą przenoszoną drogą płciową, wywołaną przez bakterie *Chlamydia trachomatis*.

Mimo że w większości przypadków zakażenie to przebiega bez żadnych symptomów, do jej objawów zalicza się wydzielinę z pochwy lub pieczenie podczas oddawania moczu u kobiet, a u mężczyzn wydzielinę z penisa, pieczenie podczas oddawania moczu oraz ból i obrzęk jednego lub obu jąder. Chłamydia przenosi się podczas uprawiania seksu pochwowego, oralnego i analnego, a także wertykalnie z matki na dziecko podczas porodu. Aby zapobiegać zarażeniu, można stosować prezerwatywy lub utrzymywać kontakty seksualne tylko z jednym partnerem, który nie jest zakażony. Dla osób aktywnych seksualnie zaleca się badanie przesiewowe co najmniej raz w roku. Chłamydia jest najczęstszą chorobą przenoszoną drogą płciową w Europie. W zależności od grupy wiekowej około 10% populacji jest zakażona chłamydią. Po wykonaniu dyskretnego testu domowego, który jest taki sam dla kobiet i mężczyzn, zakażenie chłamydiozą można wyleczyć, stosując antybiotyki.


Ważne

- Przed wykonaniem testu, należy uważnie przeczytać treść instrukcji.
- Jest to test przeznaczony do jednorazowego użytku, dlatego tak ważne jest zapoznanie się z instrukcją na temat jego stosowania oraz zrozumienie, co należy zrobić, przed rozpoczęciem badania. Instrukcje należy wykonywać dokładnie zgodnie z opisem. W przeciwnym razie wynik badania może być niepoprawny.
- Zestaw do badania należy przechowywać w temperaturze od 2 do 30°C. Nie należy stosować po upływie terminu ważności nadrukowanego na saszetce.
- Płytke testową należy przetrzymywać w zapieczętowanej saszetce do czasu rozpoczęcia badania.
- Tylko do użytku zewnętrznego. Podczas wykonywania badania, należy unikać kontaktu rąk z oczami i nosem. W pobliżu testu nie wolno jeść, pić, ani palić tytoniu.
- Nie należy używać testu po upływie daty ważności, ani gdy opakowanie jest uszkodzone lub otwarte.
- Nie należy powtórnie wykorzystywać tego testu.
- Należy unikać zakażenia krzyżowego pobranego materiału. W przypadku testów Duo, każdą próbkę należy umieszczać w osobnej probówce.
- Nie należy pomylić, ani mieszać roztworów buforowych różnych partii. Nie należy mylić zakrętek na butelkach roztworów.
- Kobiетom w ciąży nie wolno używać szczoteczek cytologicznych.

Wykonanie badania

Płytke testową należy przetrzymywać w zapieczętowanej saszetce do czasu rozpoczęcia badania.

- 1** Przed wykonaniem badania, należy dokładnie umyć ręce ciepłą wodą z mydłem, a następnie opłukać je i wysuszyć czystym ręcznikiem.
- 2** Wykonując badanie, należy umieścić wszystkie elementy zestawu na czystej i płaskiej powierzchni.
- 3** Kobiety: dwoma palcami należy otworzyć wejście do pochwy i wsunąć patyczek do pobrania próbki do wewnątrz. Jeżeli u ujścia pochwy znajduje się wydzielina, należy ją również pobrać.
- 3** Mężczyźni: należy wsunąć patyczek do wykonywania badania do wewnątrz cewki moczowej na głębokość 2-3 cm.

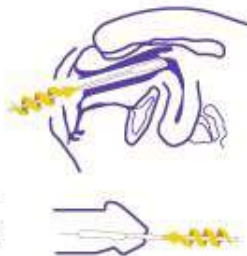

- 4** Następnie należy przez 5 do 10 sekund obracać patyczkiem wewnątrz pochwy/cewki moczowej.
- 5** Patyczek do pobrania próbki należy następnie umieścić w dołączonej probówce.
- 6** Do próbki należy dodać 8 kropli roztworu Reagent 1.
- 7** Jednocześnie należy ścisnąć probówkę 15 razy i obracać w niej patyczkiem.
- 8** Patyczek należy trzymać w probówce przez 2 minuty.
- 9** Następnie należy dodać do próbki 8 kropli roztworu Reagent 2.
- 10** Ponownie należy ścisnąć probówkę 15 razy i jednocześnie obracać w niej patyczek.
- 11** Należy wyjąć patyczek z tubki wyciskając go tak, aby usunąć jak najmniej zawartości próbki. Następnie należy nałożyć na probówkę dołączoną do niej nasadkę.
- 12** Do okienka oznaczonego literą (S) na płytce testowej, należy wycisnąć trzy krople materiału z próbki.

Wynik testu można odczytać po 10-15 minutach (nie należy odczytywać wyniku testu po upływie tego czasu). Jeżeli objawy zakażenia utrzymują się, niezależnie od wyniku badania, radzimy skonsultować się ze swoim lekarzem rodzinnym.